

Distributed by:

Ortho Organizers, Inc.  
1822 Aston Avenue  
Carlsbad, CA 92008  
USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600  
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607  
USASales@OrthoOrganizers.com  
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the *Ortho Organizers'* Web site at  
**OrthoOrganizers.com**



**mdi Europa GmbH**

Langenhagener Str. 71  
30855 Langenhagen, Germany  
49 511 39 08 9530



OMA Member  
Orthodontic Manufacturers  
Association



**Made  
in the  
USA**

INS31A  
Rev A


# Brace Relief™

**REF 301-032/036/037**

## INSTRUCTIONS FOR USE

**Brace Relief™**  
REF 301-032/036/037  
INSTRUCTIONS FOR USE

Pinch BRACE GARD material over dry bracket locking material behind edges and undercuts. Finish by smoothing with a wet finger.

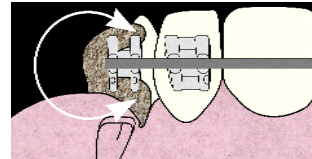

### IMPORTANT

Material and bracket must be dry.

### ACTIVE INGREDIENTS

Benzocaine, Phenol, Myrrh, Menthol, Aromatic Oils, Glycerin, Methyl Salicylate.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1) Dry irritated area (using cotton tip applicator or gauze) then apply one or two drops of BRACE RELIEF™ gel.

2) Allow area to be undisturbed for three to five minutes (especially before bedtime).

3) Application before meals will allow patient to eat with less discomfort.

4) Apply sufficient silicone BRACE GARD™ necessary to cover offending wire or bracket. See illustration.

### WARNING

Keep this, like all medicines, out of reach of children.

### CAUTION


For temporary relief only. If pain persists consult your doctor or orthodontist.

**Brace Relief™**

REF 301-032/036/037

MODE D'EMPLOI

Pincez un tampon de BRACE GARD par-dessus un bracket sec, en poussant le tampon derrière les bords et sous les découpes du bracket. Polissez ensuite avec un doigt humide.

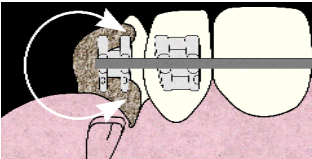

### IMPORTANT

Le tampon comme le bracket doivent être secs.

### PRINCIPES ACTIFS

benzocaïne, phénol, myrrhe, menthol, huiles aromatiques, glycérine, salicylate de méthyle.

### MODE D'EMPLOI

1) Séchez la zone irritée (à l'aide d'un Coton-Tige ou d'une compresse de gaze) puis mettez une ou deux gouttes de gel Brace Relief™.

2) Evitez de toucher pas la zone traitée pendant trois ou cinq minutes (surtout avant le coucher).

3) Les applications du produit faites avant les repas permettront au patient d'avoir moins mal lorsqu'il mangera.

4) Utilisez suffisamment de Brace Gard™ pour recouvrir le fil ou le bracket responsable de la gêne ressentie. Voir l'illustration.

### AVERTISSEMENT

Conservez ce produit, comme tout médicament, hors de portée des enfants.

### ATTENTION


Pour le soulagement temporaire des symptômes seulement. Si la douleur persiste, consultez votre médecin ou orthodontiste.

## Brace Relief™

REF 301-032/036/037

GEBRAUCHSANWEISUNG

BRACE GARD auf das trockene Klammersperrmaterial hinter Kanten und Unterschnitten aufdrücken. Mit einem angefeuchteten Finger glattstreichen.

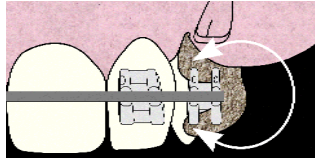

### WICHTIG

Material und Klammer müssen trocken sein.

### AKTIVE INHALTSSTOFFE

Benzocain, Phenol, Myrrhe, Menthol, aromatische Öle, Glycerin, Methylsalizylat.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1) Gereizte Stellen mit einem Wattestäbchen oder einem Stück Mull trocknen, und ein bis zwei Tropfen BRACE RELIEF™ Gel auftragen.
- 2) Die behandelten Stellen drei bis fünf Minuten lang nicht berühren (insbesondere vor dem Zubettgehen).
- 3) Durch Behandlung vor den Mahlzeiten kann der Patient beschwerdefreier essen.
- 4) Eine zur Bedeckung des reizenden Klammerteils oder Drahts ausreichende Menge BRACE GARD™ auftragen. Siehe Abbildung.

### WARNUNG

Wie alle Arzneimittel auch dieses Medikament für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### VORSICHT


Nur zur vorübergehenden Schmerzlinderung. Bei andauernden Schmerzen den Arzt oder Kieferorthopäden zu Rate ziehen.

## Brace Relief™

REF 301-032/036/037

INSTRUCCIONES DE USO

Pellizque el material BRACE GARD sobre el bracket seco, colocándolo detrás de los bordes e incisiones. Termine el acabado con el dedo húmedo.

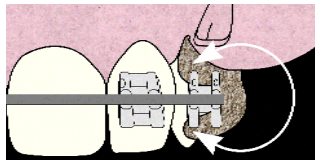

### IMPORTANTE

El material y el bracket deben estar secos.

### INGREDIENTES ACTIVOS

Benzocaína, fenol, mirra, mentol, aceites aromáticos, glicerina, salicilato de metilo.

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Seque la región irritada (con una punta de algodón o gasa) y luego aplique una o dos gotas de gel BRACE RELIEF™.
- 2) Permita que la región tratada repose durante tres a cinco minutos (especialmente antes de dormir).
- 3) Cuando se aplica antes de las comidas, el paciente podrá comer con menos molestias.
- 4) Aplique suficiente BRACE GARD™ de silicona para cubrir el alambre o bracket que estén causando las molestias. Consulte la ilustración.

### ADVERTENCIA

Al igual que con toda medicina, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

### PRECAUCIÓN


Para alivio temporal únicamente. Si el dolor persiste, consulte a su médico u ortodoncista.

## Brace Relief™

REF 301-032/036/037

ISTRUZIONI PER L'USO

Spremere il materiale BRACE GARD sopra il materiale di bloccaggio degli attacchi asciutto dietro i bordi e i sottosquadri. Lisciare il materiale con il dito bagnato.

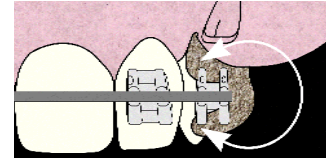

### IMPORTANTE

Il materiale e l'attacco devono essere asciutti.

### COMPONENTI ATTIVI

paraaminobenzoato di etile, fenolo, mirra, mentolo, oli aromatici, glicerina, salicilato di metile.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Asciugare l'area irritata (con un applicatore di cotone o garza) e applicare una o due gocce di gel BRACE RELIEF™.
- 2) Lasciare a riposo l'area per 3-5 minuti (soprattutto prima di coricarsi).
- 3) Un'applicazione prima dei pasti consente di alleviare il disagio durante la masticazione.
- 4) Applicare una quantità di BRACE GARD™ in silicone sufficiente a coprire il filo o l'attacco che dà fastidio. Vedere l'illustrazione.

### ATTENZIONE

conservare questo prodotto fuori dalla portata dei bambini, come tutti i farmaci.

### AVVERTENZA

da usare soltanto per sollievo temporaneo. Se il dolore continua, consultare il medico o l'ortodontista.